



VÁLVULAS PRODUTOS PMH

CATÁLOGO PRODUTOS

PMH-03P-02F REV.01

FL-PMH-004 REV.00 | Data: 28/02/2024

Cuidar com Excelência

PMH - Produtos Médicos Hospitalares, S.A. | +351 263 650 680 | www.pmh.pt | info@pmh.pt



PRODUTOS CSTD

CLOSED SYSTEMS TRANSFER DEVICES

“GARANTIR O MANUSEAMENTO SEGURO DE MEDICAMENTOS PARA QUIMIOTERAPIA COM EQUIPAMENTOS AVANÇADOS.”

A EXPOSIÇÃO PROLONGADA A MEDICAMENTOS PARA QUIMIOTERAPIA APRESENTA RISCOS PARA A SAÚDE, NÃO APENAS PARA OS PACIENTES, MAS TAMBÉM PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NA SUA PREPARAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO. É FUNDAMENTAL TOMAR PRECAUÇÕES CONTRA ESTES POTENCIAIS PERIGOS.

OS SISTEMAS FECHADOS FORAM PROJETADOS ESPECIFICAMENTE PARA PROTEGER OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS EFEITOS ADVERSOS DE MEDICAMENTOS ALTAMENTE TÓXICOS. TENDO COMO PRINCIPAL FUNÇÃO, GARANTIR A RETENÇÃO DESSES MEDICAMENTOS.

A INCLUSÃO DE UM PERFURADOR NUM FIXADOR DE FRASCOS DESEMPENHA UM PAPEL FUNDAMENTAL. ESTA CARACTERÍSTICA GARANTE QUE, MESMO EM CASO DE ACIDENTE, NÃO HAVERÁ DERRAME DE MEDICAMENTO. COMO RESULTADO, REDUZ DRASTICAMENTE A PROBABILIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENTRAREM EM CONTACTO DIRETO COM O MEDICAMENTO, PREVENINDO POTENCIAIS CONTAMINAÇÕES.

OS SISTEMAS DE PREPARAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DE CITOSTÁTICOS DA PMH SÃO UMA GAMA DIVERSIFICADA DE PRODUTOS, SENDO CADA UM PROJETADO PARA SITUAÇÕES ESPECÍFICAS, AUMENTANDO A EFICIÊNCIA E ADAPTABILIDADE DO SISTEMA.





VÁLVULAS SISTEMA FECHADO


806.4373 - VÁLVULA BIDIRECIONAL QUICK LOCK®

- PERMITE O USO DE UM SISTEMA FECHADO E CONEXÃO SEGURA
- COMPATÍVEL COM VÁLVULA QUICK GEN2
- ADAPTAÇÃO PROTEGIDA EVITANDO CONTAMINAÇÃO ACIDENTAL
- FÁCIL DESCONEXÃO, SEM NECESSIDADE DE ROTAÇÃO: PREVENÇÃO DE TENDINITES.
- CDM: 74572059
- UNIDADES POR CAIXA: 200



806.4372 - VÁLVULA BIDIRECIONAL GEN 2®

- TIPO DE PRESSÃO: NEUTRA
- VOLUME RESIDUAL: 0,016ML
- CONTÉM LÁTEX: NÃO
- CONTÉM METAL: NÃO
- FLUIDO RESIDUAL EXTERNO NA DESCONEXÃO: MÍNIMO
- SEQUÊNCIA DE FIXAÇÃO: NÃO NECESSÁRIA
- TAXA DE FLUXO: 100 ML/MIN
- PRESSÃO DE RETORNO: 50PSI
- PESO: 0,6 G
- COMPRIMENTO: 26,50 MM
- COMPATÍVEL COM ÁLCOOL E LÍPIDOS
- CDM: 74572067
- UNIDADES POR CAIXA: 200

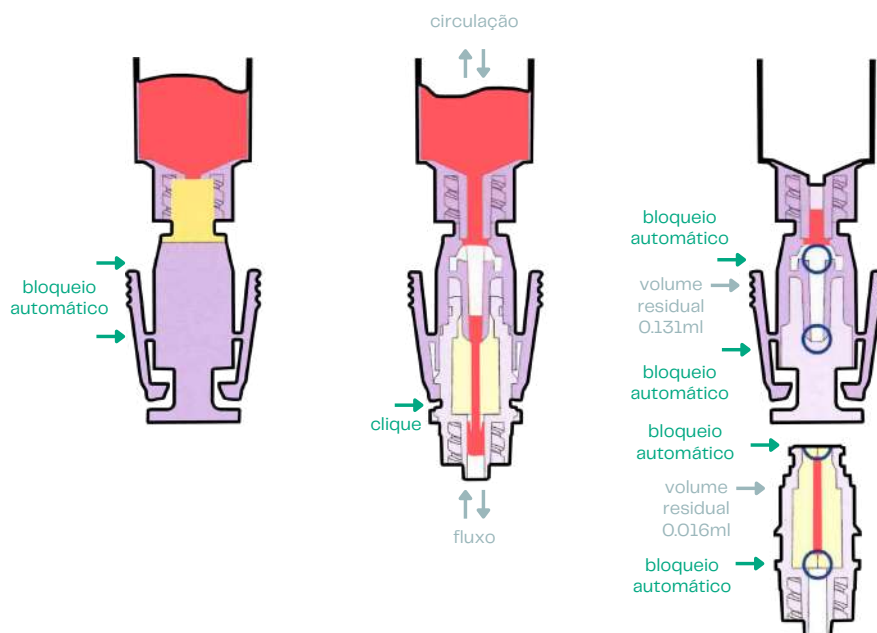



VÁLVULAS PROCEDIMENTO FECHADO

806.4409 - VÁLVULA CARESAFE®

- VÁLVULA DE TECNOLOGIA SPLIT-SEPTUM. ATIVAÇÃO LUER OU LUER LOCK COM SEPTO DIVIDIDO;
- VEDAÇÃO PLANA FECHADA QUE PROPORCIONA UMA BARREIRA MICROBIANA;
- A VÁLVULA ESTÁ ABERTA DURANTE A ASPIRAÇÃO OU DURANTE A INFUSÃO, E FECHA QUANDO É SEPARADA DO DISPOSITIVO DE INFUSÃO;
- SIMPLES MANUSEIO E ACESSO FÁCIL - LUER LOCK E LUER SLIP;
- ADEQUADO PARA INFUSÕES DE TPN, SANGUE E QUIMIOTERAPIA;
- COMPATÍVEL COM LÍPIDOS, ÁLCOOL, CLOROHEXIDINA E QUIMIOTERAPIA;
- COMPATÍVEL COM RMN.
- TIPO DE PRESSÃO PRESSÃO: NEUTRA
- TAXA DE FLUXO: 110-150ML/MIN
- VALOR RESIDUAL: 0,016ML
- Nº DE ATIVAÇÕES: 7DIAS/600 ATIVAÇÕES
- CDM: 75476541
- UNIDADES POR CAIXA: 250



806.4467 - VÁLVULA CARESAFE® OPACA

- VÁLVULA DE TECNOLOGIA SPLIT-SEPTUM. ATIVAÇÃO LUER OU LUER LOCK COM SEPTO DIVIDIDO;
- VEDAÇÃO PLANA FECHADA QUE PROPORCIONA UMA BARREIRA MICROBIANA;
- A VÁLVULA ESTÁ ABERTA DURANTE A ASPIRAÇÃO OU DURANTE A INFUSÃO, E FECHA QUANDO É SEPARADA DO DISPOSITIVO DE INFUSÃO;
- SIMPLES MANUSEIO E ACESSO FÁCIL - LUER LOCK E LUER SLIP;
- ADEQUADO PARA INFUSÕES DE TPN, SANGUE E ONCOLOGIA;
- COMPATÍVEL COM LÍPIDOS, ÁLCOOL, CLOROHEXIDINA E QUIMIOTERAPIA;
- COMPATÍVEL COM RMN.
- ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES FOTOSSENSÍVEIS.
- TIPO DE PRESSÃO PRESSÃO: NEUTRA
- TAXA DE FLUXO: 110-150ML/MIN
- VALOR RESIDUAL: 0,016ML
- Nº DE ATIVAÇÕES: 7DIAS/600 ATIVAÇÕES
- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 200





VÁLVULAS PROCEDIMENTO FECHADO

806.2897 - VÁLVULA NEUTROVAL®

- VÁLVULA DE TECNOLOGIA SPLIT-SEPTUM
- ANTES DA SUA UTILIZAÇÃO, ESTA MEMBRANA DEVE SER DESCONTAMINADA COM ÁLCOOL A 70% OU CLOROEXIDINA.
- INJEÇÃO/ASPIRAÇÃO COM PONTO DE DESINFECÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO SEM AGULHA;
- BARREIRA CONTRA MICRORGANISMOS EM USO PROLONGADO;
- SIMPLES MANUSEIO E ACESSO FÁCIL - LUER LOCK E LUER SLIP;
- COMPATÍVEL COM ÁLCOOL, LÍPIDOS, CLOROHEXIDINA E CITOSTÁTICOS;
- COMPATÍVEL COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E SANGUE.
- TIPO DE PRESSÃO PRESSÃO: NEUTRA
- TAXA DE FLUXO: 165ML/MIN
- VALOR RESIDUAL: <0.04ML
- PRESSÃO MÁXIMA: 27.58 BAR
- Nº ATIVAÇÕES: 7 DIAS / 700 ATIVAÇÕES
- CDM: 88946738
- UNIDADES POR CAIXA: 200



806.2300 - VÁLVULA MICROCLAVE®

- VÁLVULA MICROCLAVE DE TECNOLOGIA SLIP-SEPTUM
- ANTES DA SUA UTILIZAÇÃO, ESTA MEMBRANA DEVE SER DESCONTAMINADA COM ÁLCOOL A 70% OU CLOROEXIDINA.
- INJEÇÃO/ASPIRAÇÃO COM PONTO DE DESINFECÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO SEM AGULHA;
- BARREIRA CONTRA MICRORGANISMOS EM USO PROLONGADO;
- SIMPLES MANUSEIO E ACESSO FÁCIL - LUER LOCK E LUER SLIP;
- COMPATÍVEL COM ÁLCOOL, LÍPIDOS, CLOROHEXIDINA E CITOSTÁTICOS;
- COMPATÍVEL COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E SANGUE.
- TIPO DE PRESSÃO PRESSÃO: NEUTRA
- TAXA DE FLUXO: 165 ML/MIN
- VOLUME RESIDUAL: <0.04 ML
- PRESSÃO MAX.: 27.58 BAR
- Nº ATIVAÇÕES: 7 DIAS / 700 ATIVAÇÕES
- CDM: 16089570
- UNIDADES POR CAIXA: 200





VÁLVULAS PROCEDIMENTO FECHADO

806.0677 - VÁLVULA ANTI-RETORNO (VAR)

- VÁLVULA ANTI-RETORNO.
- RESISTENTE A LÍPIDOS;
- COMPATÍVEL COM QUIMIOTERAPIA E RMN.
- FLUXO ≥ 150 ML/MIN.
- ≥ 90 ML/MIN. (GLUCOSE 40%)
- RESISTÊNCIA PRESSÃO MÁXIMA: 6BAR
- PRESSÃO DE ABERTURA: ≤ 12 MBAR
- CDM: 17299306
- UNIDADES POR CAIXA: 200



806.4690 - VÁLVULA SEGURANÇA-TOTAL

- VÁLVULA DE ADMINISTRAÇÃO DE DROGAS, INTUITIVA SEGURA E SEM AGULHA-
- CONEXÃO MACHO, DESINFETÁVEL
- FECHA AUTOMATICAMENTE QUANDO É DESCONECTADA.
- REDUZ A EXPOSIÇÃO ÀS DROGAS E À CONTAMINAÇÃO MICROBIANA.
- FÁCIL DE USAR COM OUTROS DISPOSITIVOS.
- TRANSPORTE SEGURO E FÁCIL.
- TECNOLOGIA DE SISTEMA FECHADO ASSEGURA UM DESCARTE SEGURO SEM CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL.
- CDM: 89384792
- UNIDADES POR CAIXA: 200



806.2550 - VÁLVULA DE SEGURANÇA TRANSPARENTE

- TAMPA DE PROTEÇÃO LUER LOCK FÊMEA
- VÁLVULA DE SEGURANÇA LUER LOCK MACHO FÊMEA
- TAMPA DE PROTEÇÃO COM FILTRO PURGA
- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 200

